

HILL 90C

Air Drop Tables



Forsco Labs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

WWW.FORSCOLABS.IT

AIR90C

Air-Drop Table

Vive, Douce, Rapide

Equipée du Système Hill Air-Drop *, l'Air90C permet au Chiropracteur de sélectionner d'un à quatre drops simultanément sur le panneau de commande latéral. Les coussins sont activés instantanément en appuyant sur l'une des 2 barres de pied.

* Le système **Hill Air-Drop**, des fonctionnalités alimentées par air-compressé.

Modèle présenté:
Sellerie Cinder
Base noire

Barres de pied:
Activent les Drops en appuyant avec le pied.

Choisissez d'un à quatre drops simultanément sur le boîtier. Option d'un deuxième boîtier de contrôle sur côté opposé .

FONCTIONS STANDARDS

- Tête inclinable, inclinaison 30° Positive et Négative (tilting)
- Air Double Drop Cervical de la Tête
- Air Drop Thoracique, Lombar et Pelvien
- Thoracique détachable (breakaway)
- Accoudoirs et Tête ouverte sur 33 cm (enrouleur de papier et cutter)
- Double pédales à bascule et 2 bandes de pied
- Support de pied rabattable
- Hauteur de 55 à 80 cm (Hauteur de départ plus élevé disponible)
- Largeur 60 cm, longueur 193 cm
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie
- Base choix de trois couleurs Beige, gris ou noir
- Garantie HILL d'un an pièces et main-d'œuvre (RA)

AIR90C

AIR-DROP TABLE



▶ DROPS À AIR COMPRESSÉ

En standard la table AIR-90C est équipée:

- Air Double Drop Cervicale de la Tête
- Air Drop Thoracique
- Air Drop Lombaire
- Air Drop Pelvien,
- Thoracique "Breakaway" l'ouverture du coussin thoracique assisté par vérin pneumatique pour plus de confort pour les femmes enceintes, ...


▶ TÊTIÈRE EN STANDARD

Tilting
Straight-Down / Drop-Forward included in Dual-Drop Headpiece (Standard on Air90C)



▶ OPTIONS POUR LA TÊTIÈRE

Raised Flexion Axial

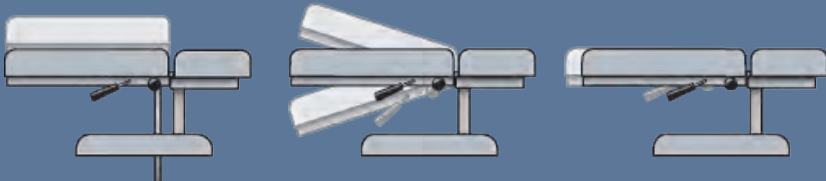

▶ OPTIONS FLEXION ET CBP

Lateral Translation/CBP




Autres options disponibles pour l'Air 90C sur le site internet

▼ DROPS STANDARD SUR AIR-90C


Drop Thoracique

Le drop thoracique sur l'Air90C*

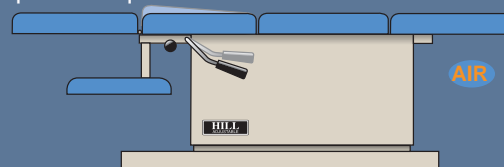


Drop Pelvien

Le drop Pelvien sur l'Air90C*

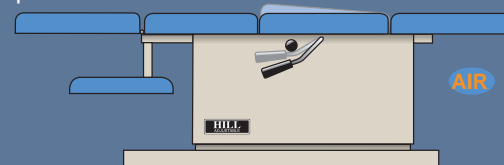


Drop Lombaire

Le drop Lombaire sur l'Air90C*

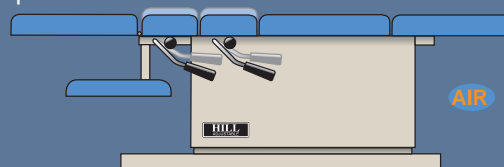

Ouverture Thoracique (Breakaway)

L'Air90C est livrée en standard avec une échappée contrôlée à par air-compressé.

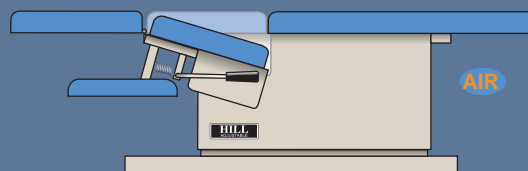

*Les drops sont activés en appuyant sur une des deux barres de pied situées de chaque côté de la table.

▼ FLEXION TÊTIÈRE



La Flexion tête est livrée avec le Tilting, sangle occipitale et barre de contrôle amovible. La tête se déverrouille (un ressort à gaz se comprime doucement et recule afin que vous contrôliez les mouvements, flexion, latérale et axiale).

HILL AIR90C

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation électrique: 7 ampères. 220 Hz - 50 Hz
- Capacité de levage : 204 kg
- Largeur standard : 60 cm (option 68,5, 76 cm)
- Longueur standard : 185 cm (Pied rabattu 162 cm)
- Support de chevilles coulissant : Retiré 155 cm, Rentré 162 cm, Étendu 193 cm.
- Hauteur standard : de 55 à 80 cm (Réglage de la hauteur électrique 15s)
- Couleur de la sellerie : 20 couleurs
- Couleur de Base : 3 couleurs, Peinture acrylique thermoplastique résistant au feu
- Hauteur de la table : 61 à 89 cm
- Épaisseur : 6.5 cm
- Densité de la sellerie : Médium, (sur demande: souple ou dure)
- Poids à l'expédition : de 113 à 136 kg.

Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre en retour atelier


COULEURS DISPONIBLES SELLERIE



COULEURS DE LA BASE



EN OPTION SELLERIE FINESSE®

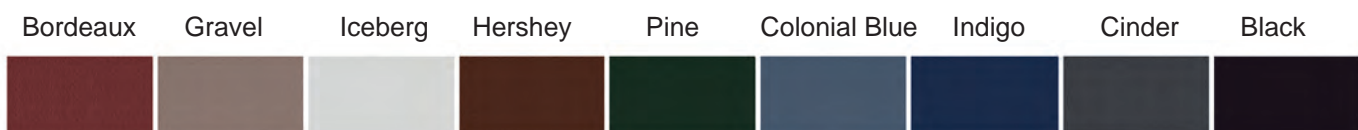

Le revêtement Boltaflex® avec Prefixx™, scientifiquement conçu pour donner une protection supérieure contre les taches, les éraflures et est garanti anti-crevaison. Les teintes peuvent avoir une variation entre la couleur réelle et la matière.

Le choix des couleurs peuvent changer sans préavis.

Visitez www.Forscolabs.it pour configurer votre table et faire votre devis en ligne. Appelez un de nos collaborateurs qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

ForscoLabs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 1 83 597 160 - Fax: +33 1 972 447 924
Contact@Forscolabs.it • www.Forscolabs.it

WWW.FORSCOLABS.IT